

i3 membrane

bringing power to separation

i3 TWO removes water-associated bacteria from drinking water

Bacteria retention (*Brevundimonas diminuta*) > 7 log/cm²


Flow rate at 1 bar water pressure > 5 l/min.

Flow rate at 5 bar water pressure > 15 l/min.



i3 Membrane GmbH - Bautzner Landstr. 400 - DE-01328 Dresden
info@i3membrane.de - www.i3membrane.de
Phone: +49 (0)40-2576748-0 - Fax: +49 (0)40-2576748-48

i3 TWO Sterile filter

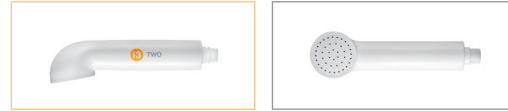

- Bedienungsanleitung
- Instruction manual



i3 TWO Sterilfilter zum Einsatz als Duschkopf

Vorbereitende Massnahmen

Desinfizieren Sie vor der Installation des i3 TWO immer zuerst Ihre Hände.

Der i3 TWO (Medizinprodukt Klasse I, sterilisiert) ist in zwei Varianten verfügbar:

1. mit einem Schnellverschlussystem (Adapter, 1/2 Zoll Außengewinde am Duschschauch)
2. mit einem Schraubgewinde.

Installation

Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf der Verpackung. Vergewissern Sie sich, dass die doppelwandige Verpackung unbeschädigt ist. Sollte diese beschädigt sein (kein sichtbares Vakuum), verwenden Sie bitte einen neuen i3 TWO.

Schneiden Sie vorsichtig die beiden Verpackungsbeutel auf, ohne den i3 TWO dabei zu beschädigen.

1. Für den Einsatz des i3 TWO mit Schnellverschlussystem:

Adaptieren Sie den Sterilfilter an dem Adapter des Duschschauches.

2. Für den Einsatz des i3 TWO mit Schraubgewinde:

Schrauben Sie den Sterilfilter direkt in das Duschschauchgewinde.

Überprüfen Sie den Adapter oder das Schlauchgewinde auf Dichtigkeit. Stellen Sie bei geöffnetem Wasserhahn den Durchfluss des i3 TWO sicher. Sollte der Filter verstopft sein, tauschen Sie ihn bitte gegen einen neuen aus.

Der i3 TWO ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt und kann nach der Installation maximal 50 Tage verwendet werden. Bei einer Anwendung, die über diese Dauer hinausgeht, ist der Keimrückhalt nicht gewährleistet.

Das Gehäuse des i3 TWO enthält ein bakteriostatisches Additiv. Die Desinfektion des Filters kann mit Flächen-Desinfektionsmitteln erfolgen. Die Entsorgung des i3 TWO erfolgt über den Hausmüll.



i3 TWO sterile filter for use as shower cap

Preparation for product use

Please disinfect your hands before installing the i3 TWO.

The i3 TWO (class I medical device, sterilized) is available in two versions:

1. with a quick-connection system (adapter, 1/2 inch male thread for shower hose)
2. with a screw thread.

Installation

Before installation, please check the expiry date on the packaging. Make sure that the double-walled packaging is not damaged. If the packaging is damaged or there is no visible vacuum, do not use the filter and take a new i3 TWO.

Cut the double-walled packaging carefully without damaging the i3 TWO.

1. Using the i3 TWO with quick-connection system:

Insert the sterile filter into the adapter of the shower hose.

2. Using the i3 TWO with screw thread:

Screw the sterile filter directly onto the hose thread.

Check the adapter or hose thread for tightness. Open the water tap and ensure that the i3 TWO operates reliably. If the filter is blocked, please change the sterile filter.

The i3 TWO is only intended for single use and can only be used following installation for a maximum of 50 days. Germ retention is not guaranteed when used for longer than 50 days.

The housing of the i3 TWO contains a bacteriostatic additive. The filter can be disinfected using surface disinfectants. The i3 TWO can be disposed of as municipal waste.

